


# Punteggio di allarme precoce (EWS)

Calcolo automatico basato sul dispositivo




Calcolo a controllo sporadico con data e ora

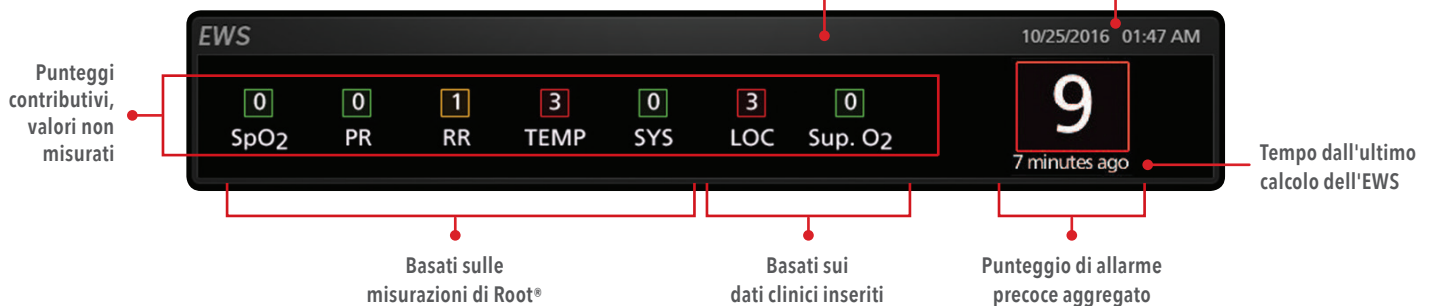

- > Il punteggio di allarme precoce (EWS) viene avviato dall'utilizzatore e calcolato automaticamente
- > I punteggi EWS che contribuiscono sono calcolati facendo uso dei valori misurati e degli input dell'utilizzatore, che vengono combinati in un EWS aggregato
- > Root è dotato di una visualizzazione chiara e di immediata interpretazione con navigazione intuitiva multi-touch, per un uso semplice e adattabile in ambiente ospedaliero

# Soluzioni avanzate di connettività con Patient SafetyNet™\* o Iris Gateway™

## Associazione del paziente al posto letto

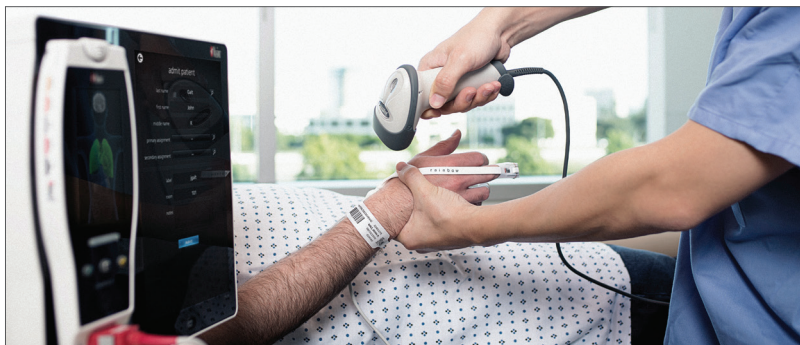

Interfaccia con il sistema ospedaliero HL7 per i ricoveri, le dimissioni e i trasferimenti (ADT), al fine di associare il paziente, il dispositivo e il medico al posto letto

## Grafici elettronici automatici




I dati paziente, compreso l'EWS, vengono acquisiti da Root

Patient SafetyNet o Iris Gateway convertono i dati in HL7

Patient SafetyNet o Iris Gateway automatizzano il trasferimento dei dati alle EMR ospedaliere

## Grafici elettronici manuali al posto letto

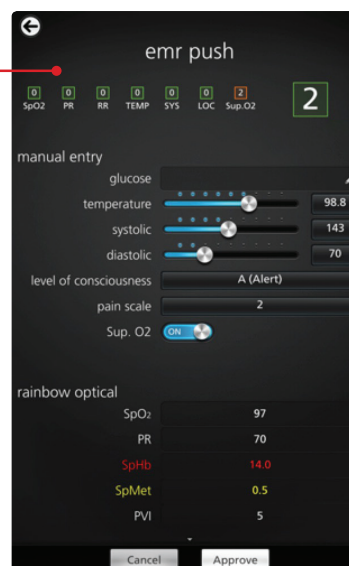

Allo scopo di semplificare la documentazione dei dati paziente, i medici possono anche inserire manualmente e verificare i dati in Root, compreso il livello di coscienza, la scala del dolore e la diuresi, e inviarli all'EMR

\* L'uso del marchio Patient SafetyNet è concesso in licenza da University HealthSystem Consortium

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, controindicazioni e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

**Masimo U.S.**  
Tel: 1 877 4 Masimo  
info-america@masimo.com

**Masimo International**  
Tel: +41 32 720 1111  
info-international@masimo.com

